


## Parabéns por adquirir o JATO LIMPO !

Ele vai ajudar a manter seus dentes e gengivas mais saudáveis de forma simples e prazerosa.

Abaixo as informações para iniciar o uso imediatamente:



### MÓDULO BORRIFADOR

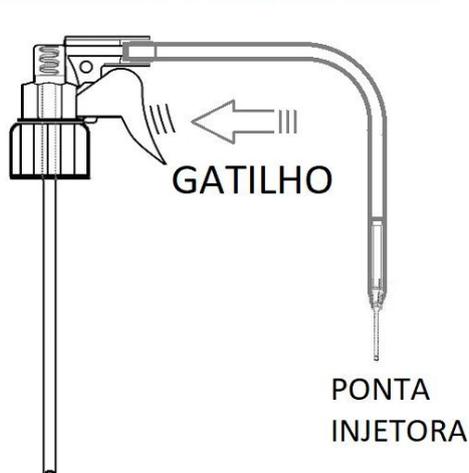

**I- IMPORTANTE: ANTES DO PRIMEIRO USO, MERGULHE TOTALMENTE O MÓDULO BORRIFADOR EM UM RECIPIENTE COM ÁGUA. MANTENHA-O SUBMERSO E ACIONE O GATILHO VÁRIAS VEZES ATÉ TIRAR TODO O AR DE DENTRO DO EMBOLO E TUBOS.**

Este procedimento só é necessário quando o módulo borrifador estiver seco (como agora que nunca foi usado). Quando seu uso for frequente ele não voltará a secar.

**II-** Encha o frasco com água ou com água misturada a uma pequena quantidade (+/- uma tampa) do seu antisséptico bucal, para dar maior frescor na boca.

**III-** Após os procedimentos acima, atarraxe o módulo borrifador no frasco já com líquido e estará pronto para uso.

### MODO DE USO:

#### 1- Como segurar :



**Com uma das mãos** segure a ponta injetora como um “palito de dente” e posicione nos intervalos entre os dentes a serem jateados.


**Com a outra mão** segure o frasco e acione o gatilho com a pressão que deseja aplicar no local a ser jateado.

**ATENÇÃO:** a força que você aplicar no gatilho; mais forte ou mais fraca, vai gerar instantaneamente a pressão do líquido na ponta injetora e assim você pode controlar a intensidade de cada jato, dependendo da sensibilidade do local.

## 2- Como guardar :

Quando deixar o aparelho em repouso cheio, garanta que a ponta injetora fique presa acima do nível do líquido no frasco, para que o líquido não continue saindo por efeito da gravidade.

A dica é inserir o bico injetor no orifício existente no suporte do embolo e encostar o tubo em uma superfície próxima para que o bico injetor fique preso ao orifício, figura abaixo:

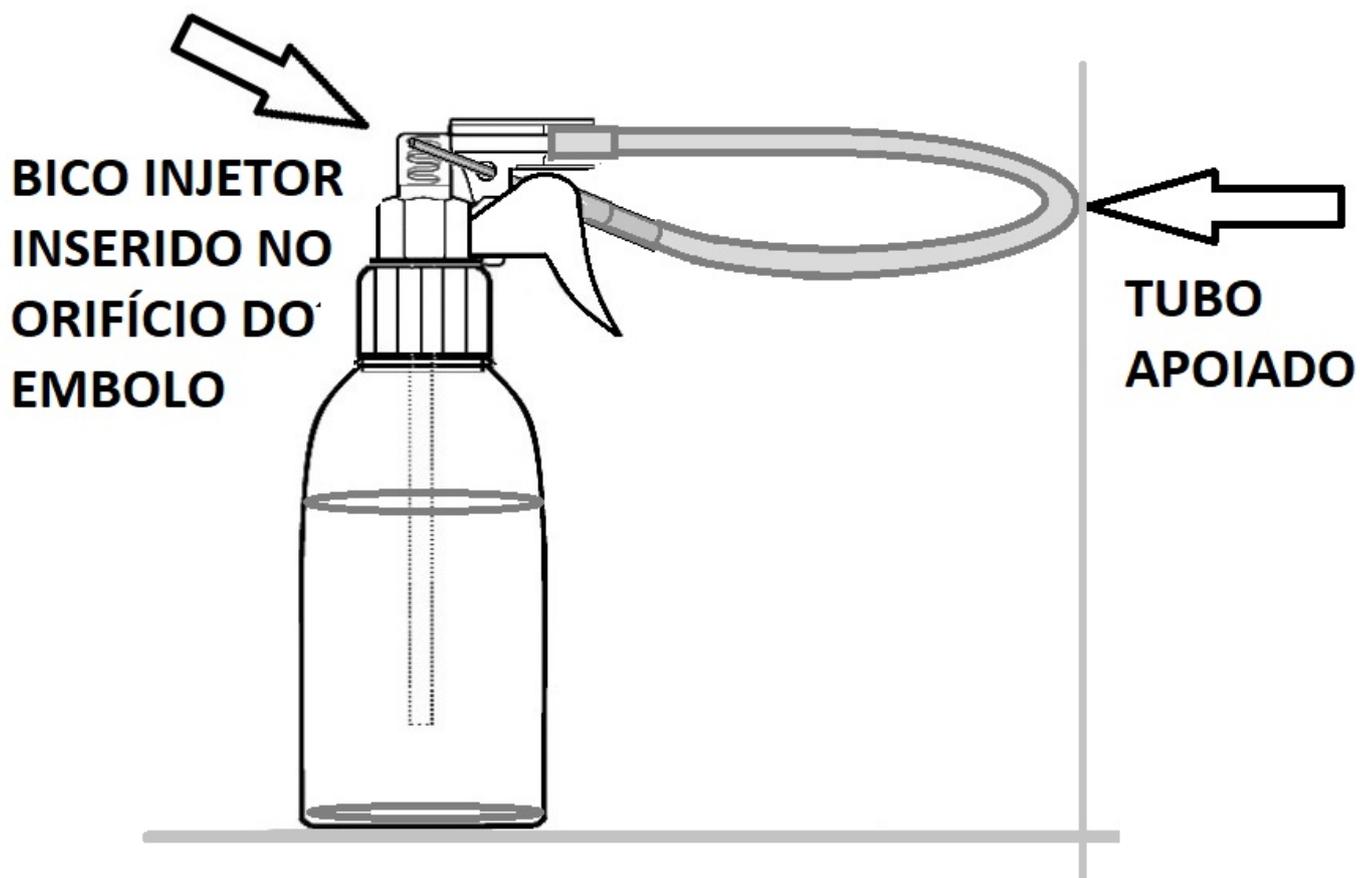

MODO DE DEIXAR EM REPOUSO PARA QUE NÃO SE ESVAZIE POR EFEITO DA GRAVIDADE